

Ústní sprcha MD 5613

Obj. č.: 37 72 12



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ústní sprchy MD 5613.


Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Uvedení do provozu

1. Vezměte nádržku na vodu (8) na rukojeti základny ústní sprchy. Otevřete ji pomocí páčky (9).
2. Naplňte nádržku na vodu vodou. Všimněte si označení maximálního objemu vody „MAX“. Nádržku na vodu uzavřete. Postavte ji zpátky do základny ústní sprchy.
3. Sprchu zapněte pomocí vypínače (6).
4. Sejměte rukojeť (3) ze základny přístroje. Otvor podržte nad umyvadlem.
5. Ovladač (5) nastavte na stupeň III.
6. Otevřete vypínač vody (2) tím, že ho posunete do polohy I.
7. Nechte vodu vytékat přímo do umyvadla, abyste odstranili případné nečistoty. Následně uzavřete vypínač vody tím, že ho uvedete do polohy 0.
8. Sprchu vypněte.
9. Trysky krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Nyní je ústní sprcha připravená k použití.

Popis a ovládací prvky

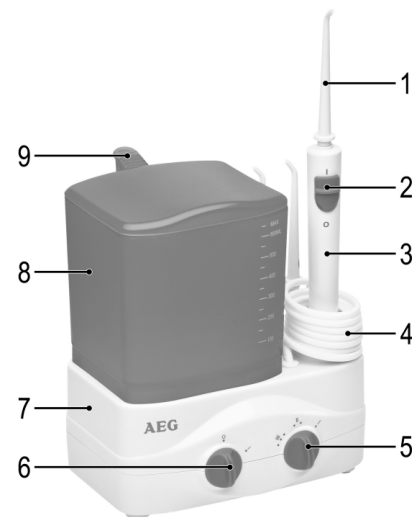

- 1 Tryska
- 2 Vypínač vody
- 3 Rukojeť
- 4 Hadička
- 5 Ovladač tlaku vody
- 6 Vypínač
- 7 Základna
- 8 Nádržka na vodu
- 9 Páčka pro otevření víčka / rukojeť nádržky na vodu

Pokyny pro používání

Připojení k elektrické síti

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí, jež se chystáte použít, odpovídá síťovému napětí výrobku. Potřebné údaje najdete na typovém štítku.
2. Zapojte síťový kabel do zásuvky s ochranným kontaktem nainstalované v souladu s předpisy.

Vypínač (6)

Poloha vypínače 0: Přístroj je vypnutý.

Poloha vypínače I: Přístroj je zapnutý.

Ovladač tlaku vody (5)

Pomocí ovladače tlaku vody si můžete nastavit tři výkonnostní stupně.

Stupeň I: nízký tlak vody

Stupeň II: střední tlak vody

Stupeň III: vysoký tlak vody

Vypínač vody (2)

Pomocí tohoto vypínače můžete krátkodobě přerušit přítok vody. Vypnutí se provádí ručně.

Čerpadlo sprchy je nadále v provozu.

Poloha vypínače I: Voda teče

Poloha vypínače 0: Voda neteče

Trysky (1)

Součástí dodávky jsou 4 trysky označené různými barvami. Ty mohou být přiděleny různým uživatelům.

Když krvácí dásně ...

Mírné krvácení dásní je po prvních několika použitích ústní sprchy normální.

Jestliže Vám ale dásně krvácí i nadále, konzultujte svého zubního lékaře.

Používání

Předtím, než ústní sprchu použijete, měli byste si vyčistit zuby kartáčkem.

1. Nasadte trysku až na doraz na rukojeť. Otočte trysku tak, aby její otvor směřoval k vypínači vody. Dbejte na to, aby tryska pevně držela.
2. Naplňte nádržku na vodu vlažnou vodou. Nepoužívejte horkou vodu!
3. Trysky vyčistíte tak, že jimi po každém použití necháte vytékat vodu (při nejvyšším tlaku vody) do umyvadla.
4. Následně pomocí ovladače tlaku vody nastavte požadovaný tlak vody. Začněte s nejmírnějším nastavením, zvláště, když máte sklony ke krvácení dásní nebo používáte ústní sprchu u dětí.
5. Otevřete vypínač vody na rukojeti.
6. Nakloňte se nad umyvadlo. Proud vody vedte podél dásní, kolem zubů.
7. Po použití zastavte přítok vody vypínačem vody. Ovladač tlaku vody nastavte na stupeň I.
8. Sprchu vypněte.
9. Výrobek čistěte podle pokynů týkajících se čištění.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ústní sprchy. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

1. Zbývající vodu vylijte z nádržky na vodu.
2. Sejměte trysku z rukojeti. Trysku očistěte pod teplou tekoucí vodou. Trysku osušte a nasadte ji na základnu výrobku.
3. Pokud jste použili nějaké přísady do vody, nádržku na vodu vypláchněte čistou vodou. Následně nechte ústní sprchu protéci asi 300 ml čisté vody.
4. Rukojeť osušte předtím, než ji nasadíte zpátky na základnu výrobku.
5. Nádržku na vodu osušte.
6. Základnu spechy očistěte navlhčeným hadříkem. Následně ji vytřete do sucha.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model	MD 5613
Provozní napětí	230 V~/50 Hz
Příkon	max. 46 W
Třída ochrany	II (IPX 7)
Hmotnost	1,3 kg



CE

AEG
perfekt in form und funktion

Záruka

Na ústní sprchu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/12/2013